

Matelas Adapt avec technologie de réduction du cisaillement (SRT)

Le matelas de remplacement en mousse **Adapt** doté de la technologie brevetée de réduction du cisaillement (SRT) et interchangeable est une solution novatrice conçue pour réduire les forces de cisaillement dues au mouvement d'un client au lit ou d'un changement de position, tout en assurant une redistribution adéquate de la pression. Le modèle Adapt est notre matelas modifiable et adapté aux clients susceptibles de subir une lésion de pression. Les traversins latéraux sont dotés d'entailles en éventail et offrent un excellent point de transfert.*


Le matelas est conçu pour absorber les forces causant des dommages cutanés, réduisant ainsi les risques de lésion de pression. Des essais cliniques indépendants ont été effectués par les facultés de soins infirmiers et d'ingénierie du Durham College of Applied Arts and Technology afin de valider la technologie SRT. Ils ont permis de confirmer avec objectivité l'efficacité de la technologie et d'appuyer son utilisation avec des populations de clients vulnérables aux forces de cisaillement pouvant endommager la peau et les tissus profonds.

5 Minds Mobility a également reçu un prix du Réseau des collèges de l'Ontario pour l'innovation industrielle pour sa technologie SRT.



*Une section de matelas ROHO® peut remplacer une ou plusieurs des sections en mousses amovibles au besoin.


permobil
ROHO SEATING + POSITIONING

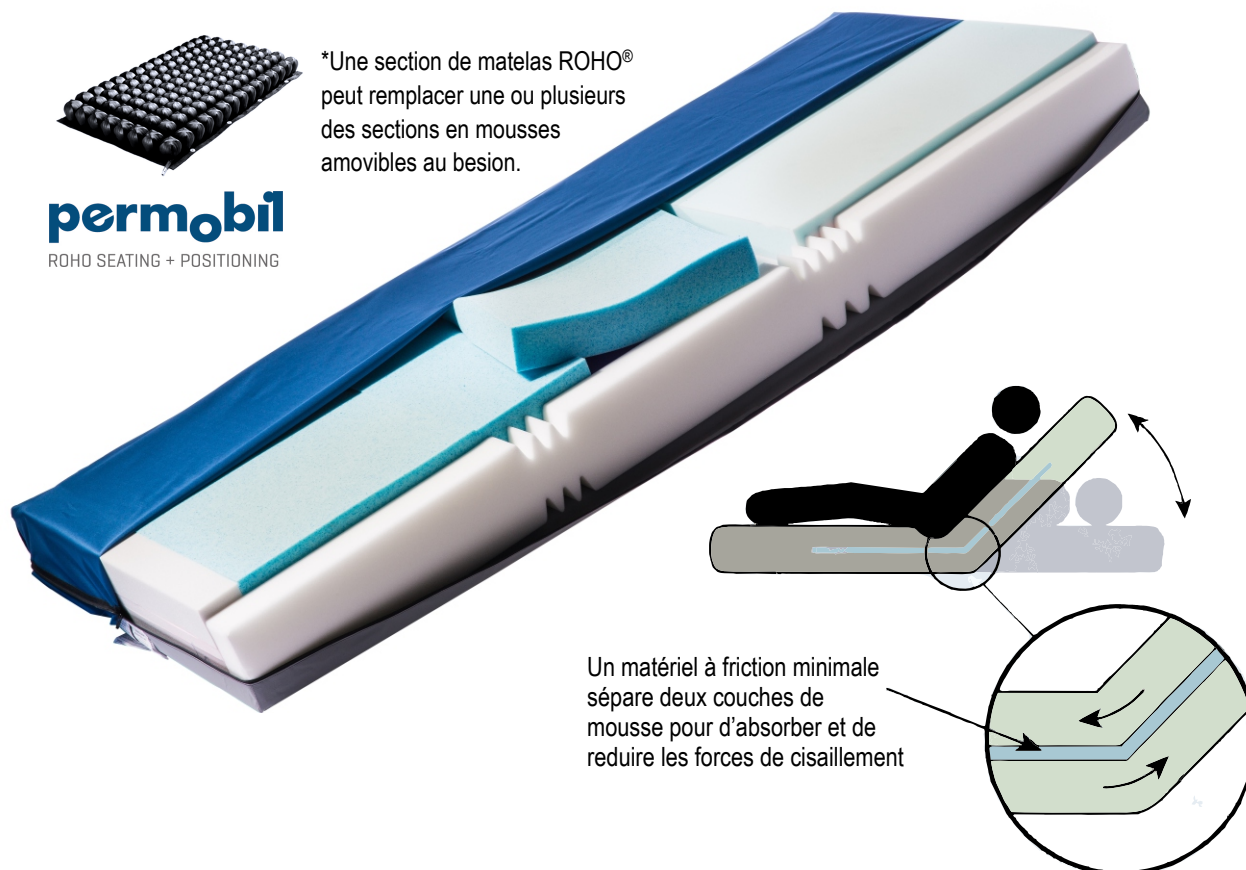

Réduire le cisaillement en partant de l'intérieur

Caractéristiques du produit :

- Sections amovibles en GelFlex permettant d'ajouter des sections de matelas ROHO®
- Mouvement sur 360 degrés offrant une réduction du cisaillement dans toutes les directions, essentiel pour réduire les risques de lésion de pression liés aux forces de cisaillement
- Sections en mousse fixes sous la tête et les pieds permettant aux composants mobiles du matelas de se déplacer par eux-mêmes
- Conçu pour réduire le besoin de remonter le patient
- Les traversins latéraux facilitent les transferts
- Conception à zones multiples pour répondre aux exigences de redistribution de la pression à la tête, au torse et aux pieds
- Section centrale surélevée pour bien entourer le client sans nuire aux transferts
- Housse imperméable aux incontinences et extensible en cinq directions
- Garantie de deux ans

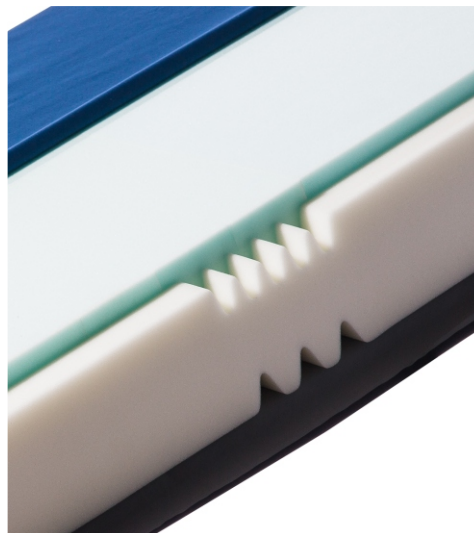

Le modèle **Adapt** est offert en version avec traversin surélevé. Une hauteur de 7,5 cm est ajoutée aux sections près de la tête et des pieds du traversin, tandis que le milieu permet de sortir le client aisément. Cette caractéristique minimise les risques de chute du client tout en étant conforme ou supérieure aux exigences des protocoles en matière d'immobilisation.



Limite de poids : 158 kg
Garantie de deux ans

Grandeur standard :
91,5 x 17,5 x 203 cm
Tailles personnalisées disponibles