

Molift Mover 205

Le lève-personne Molift Mover 205 est adapté à utilisation fréquente et quotidienne, aux situations de transfert lors des soins infirmiers et en milieu hospitalier. La fonction de retrait rapide offre la possibilité d'ajouter un cintre à 2 ou 4 points en option disponibles dans différentes dimensions. Un lève-personne doté d'une grande flexibilité et de nombreux accessoires.



Molift Mover 300

Le lève-personne Molift Mover 300 offre une capacité de levage élevée de 300 kg. Le système constitue la solution idéale pour les hôpitaux et les établissements de soins accueillant des patients obèses dont les besoins en transfert et en manutention sont fréquents et quotidiens. Avec son faible poids et sa grande capacité, il est l'un des plus légers de sa catégorie.



Molift Mover 300 avec barres latérales

Caractéristiques

pour châssis standard hors cintre

	Molift Mover 180	Molift Mover 205	Molift Mover 300
Poids maximum du patient (CMU)	180 kg	205 kg	300 kg
Poids total	32 kg	37,6 kg	40,1 kg
Longueur	1 260 mm	1 285 mm	1 285 mm
Largeur du châssis (extérieur)	700 mm	700 mm	700 mm
Largeur du châssis (intérieur)	550 mm	550 mm	550 mm
Largeur du châssis, pieds ouverts (intérieur)	1 025 mm	1 065 mm	1 065 mm
Hauteur du pied	105 mm	115 mm	115 mm
Batterie	Ni-MH 14,4 -2,6 Ah	Ni-MH 26,4 V-2,6 Ah	Ni-MH 26,4 V-2,6 Ah
Temps de charge de la batterie	3 heures	3 heures	3 heures
Hauteur de levage	270-1 630 mm	2 093 mm	2 100 mm
Amplitude de levage	1 365 mm	1 431 mm	1 420 mm
Vitesse de levage	40 mm/s	40 mm/s	32,6 mm/s
Performance nominale	50 levages/75 kg/500 mm	50 levages/75 kg/500 mm	50 levages/75 kg/500 mm
Logiciel d'entretien	Inclus	Inclus	Inclus
Matériaux	Aluminium, acier, plastique	Aluminium, acier, plastique	Aluminium, acier, plastique




Cintres pour lève-personnes mobiles Molift

Une gamme de cintres légers avec accrochage rapide pour un échange facile

Les cintres en aluminium Molift s'adaptent aussi bien sur les lève-personnes neufs qu'anciens. Le cintre léger avec accrochage rapide simplifie le travail des soignants.

Le peson homologué classe III est conforme à toutes les normes techniques. Il calcule l'IMC (indice de masse corporelle) d'une simple pression sur un bouton.

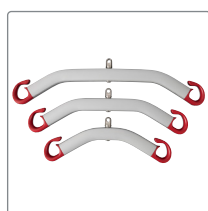

Cintre à 2 points Mover 180

Aluminium/zinc, CMU de 300 kg

Small.1830043
Medium.....1830042
Large.....1830041



Cintre à 2 points Mover 205 avec Peson

Aluminium/zinc, CMU de 300 kg

Small.1430120
Medium.....1430121
Large.....1430122



Cintre à 4 points Mover 180

Aluminium/zinc, CMU de 300 kg

Small.....1830110
Medium.....1830111
Large.....1830112
Extra large.....1830113



Cintre à 4 points Mover 205/300 avec peson

Aluminium/zinc, CMU de 300 kg

Medium.....1530110
Large.....1530111



Pèse-personne Mover 180

CMU de 300 kg

Balance.....1840000



Cintre à 4 points Partner 255

Aluminium/zinc, CMU de 255 kg


Medium.....1330160



Cintre à 2 points Mover 205

Aluminium/zinc, CMU de 300 kg

Small.....1430117
Medium.....1430116
Large.....1430115

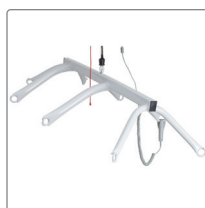

Support civière à 8 points Partner 255

Acier, CMU de 255 kg

Medium.....2140002



Cintre à 4 points Mover 205/300

Aluminium/zinc, CMU de 300 kg

Medium.....1530101
Large.....1530102
Extra large.....1530103



Peson Partner 255

CMU de 300 kg

Peson1331002

Dimensions (mm)

	Small	Medium	Large	Extra large
Cintre à 2 points	H130 x L350	H130 x L450	H130 x L550	-
Cintre à 4 points	H210 x I300 x L350	H240 x I300 x L450	H240 x I300 x L550	H240 x I300 x L650
Support civière à 8 points	-	H420 x I920 x L1 430	-	-

Molift Service Tool

Le logiciel qui interagit avec le lève-personne

Garantie d'un entretien et d'une maintenance appropriés

Tous les lève-personnes Molift sont équipés d'un logiciel de maintenance intégré qui indique quand un entretien est requis. Ce logiciel garantit au patient, au soignant et à l'établissement que le lève-personne est sécurisé au sens des lois et réglementations applicables.

Molift Service Tool calcule le nombre de levages et produit un signal d'avertissement lorsqu'une opération d'entretien est nécessaire. Grâce au logiciel Molift Service Tool, un technicien peut se connecter au lève-personne et interagir avec celui-ci afin de réaliser et consigner des opérations d'entretien et de dépannage technique. Le logiciel permet également de lire, de vérifier et d'ajuster les paramètres clés du lève-personne, ainsi que de consigner, de lire et d'imprimer l'historique des entretiens.

Le logiciel donne accès à une liste de contrôle d'entretien spécifique au produit.

Enregistrer et analyser l'utilisation du lève-personne

Le logiciel Molift Service Tool peut aussi servir à récupérer des données sur l'utilisation du lève-personne et sur les habitudes de levage. Lorsque les données sont liées à un accident de travail chez les employés, il peut aider les employeurs à réduire les blessures. De plus, il peut améliorer l'efficacité puisqu'il indique si les types de lève-personnes conviennent au groupe de patients et à leurs besoins.

L'outil Molift Service Tool nous permet de récupérer des données sur les lève-personnes Molift dans le monde entier et d'améliorer constamment nos produits.

